

v·Relift



Microneedling • Vacuum • Cryo terapia
Radio frequenza frazionata e bipolare




MANIPOLO MICRO NEEDLING VACUUM RF

Il manipolo **Microneedling** è dotato di un motore Haydon di produzione americana. La velocità e la profondità di penetrazione sono controllate elettronicamente e offrono un movimento fluido dell'ago per un **trattamento più rapido e confortevole**.


TESTINE ad AGHI MULTIPLI

10 AGHI occhi e naso
25 AGHI viso
36 AGHI viso
49 AGHI braccia e gambe
64 AGHI corpo

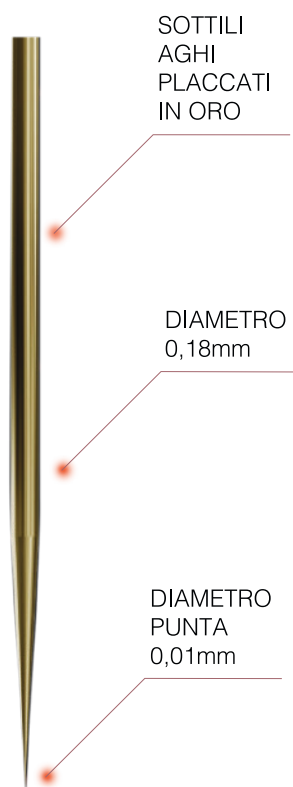


AGHI NON ISOLATI

Colpiscono contemporaneamente sia gli strati superiori che quelli inferiori della pelle.

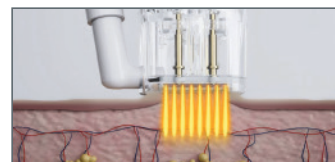

AGHI ISOLATI


Emettono energia solo alla punta dell'ago per colpire il derma e risparmiare l'epidermide.

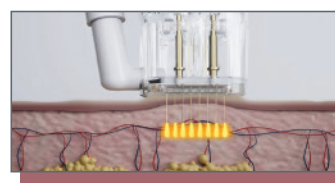

Come FUNZIONA?


STEP 1

Il manipolo aderisce con la pelle

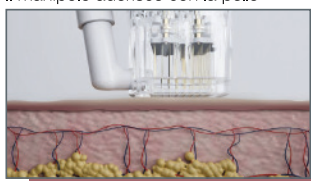


STEP 2

Il sistema vacuum avvia il processo di suzione della pelle

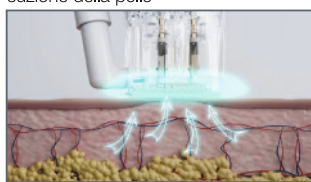


STEP 3

I micro-aghi penetrano uniformemente nella pelle

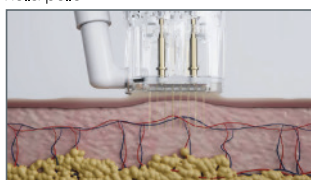


STEP 4

L'energia RF frazionata trasforma il tessuto modificandone la densità

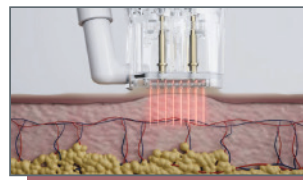

STEP 5

Si avvia il processo di produzione di nuovo collagene e nuova elastina

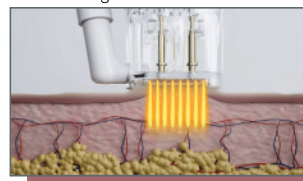

MICRONEEDLING a RADIOFREQUENZA FRAZIONATA

Il trattamento adatto sia per LEI che per LUI

✓ Relift

Lifting

Tonicità della Pelle

Cicatrici da acne

Smagliature

Riduzione dei pori

Cicatrici

Riduzione delle rughe



MANIPOLO THERMAGICAL RF

La radiofrequenza agisce sulla densità dei tessuti con un effetto tensore. Tonifica, modella e leviga le rughe.

5 MHz

8 MHz

TESTINE RF IN QUATTRO DIVERSE MISURE

■ **5x5mm**
occhi e naso

■ **10x10mm**
viso

■ **20x20mm**
braccia e gambe

■ **40x40mm**
corpo

DUE FREQUENZE

per raggiungere diverse profondità di tessuto.

- **5MHz** agisce sugli strati più profondi e sulle pelli inspessite.
 - **8MHz** agisce sugli strati superficiali e sulle pelli più sottili e sensibili.
- La frequenza può essere cambiata agilmente durante il trattamento.

ZERO TEMPI DI RECUPERO




MANIPOLO CRYO

Ottimo per alleviare il dolore, lenire la pelle e restringere i pori.
Riduce il rossore post-trattamento e il rischio di pigmentazione grazie alla temperatura minima di 3°.

STEP 1



STEP 2

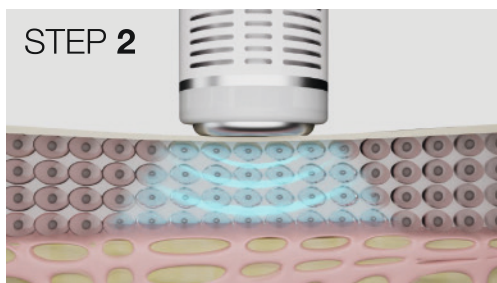

DISPLAY
ALTA DEFINIZIONE
TOUCH SCREEN

13



V-Relift

Microneedling • Vacuum • Cryo terapia
Radio frequenza frazionata e bipolare

la tua

SCELTA INTELLIGENTE

SUPPORTO MARKETING CONTINUO

Entrare nel mondo Sphera significa avere gli strumenti necessari per essere sempre in contatto con i tuoi clienti e acquisirne di nuovi. Per questo, V-Relift include:

1

SPHERA OFFICIAL KIT

Tutto quello di cui hai bisogno per presentare V-Relift ai tuoi clienti e comunicare la tua *scelta intelligente*: soddisfare le loro richieste con un prodotto Made in Italy, sicuro ed efficace.

2

SPHERA SUITE

Il tuo **marketing specialist** dedicato alla creazione di contenuti personalizzati on-line e off-line: dalla campagna web ai manifesti, dai post social alle iniziative speciali.

SCHEDA TECNICA

RF Frequenza	5MHz/8MHz
Potenza	400W
Monitor	13"
Voltaggio	AC220V±10% 50HZ, 110v±10% 60HZ
Ampiezza Impulso	Manipolo Microneedling 50-600ms Manipolo RF Frazionata 100-3000ms
Profondità Impulso	0,5mm
Dimensioni	45x127x65cm
Peso dispositivo	47 Kg



www.spheratechnologies.com

V-Relift è distribuito da



Sphera srl - Strada Lungofino, 187 • c/o c.c. Ibisco B9/10 • 65013 Città Sant'Angelo (PE)
Tel. +39 085 4483235 • info@spheratechnologies.com

